

Le kit ULCER X Sigvaris est très efficace dans le traitement des ulcères veineux de la jambe.



Objectif et plan de l'étude

L'objectif de cette étude consistait à évaluer l'efficacité d'un kit de bas de compression spécifiquement conçu (kit ULCER X Sigvaris, « ULCER X ») pour le traitement des ulcères veineux de la jambe en comparaison avec le traitement standard reposant sur l'utilisation de bandages à allongement court. Le kit ULCER X se compose d'un sous-bas* porté en permanence et d'un sur-bas** porté uniquement pendant la journée. Les bandages à allongement court étaient portés de jour comme de nuit.

Participants

26 patients portant le kit ULCER X et 30 patients portant des bandages à allongement court ont participé à l'étude.

Détails de produits

* Sous-bas 15–20 mmHg

** Sur-bas 23–32 mmHg

Une fois l'un sur l'autre, le sous-bas et le sur-bas exercent une pression d'env. 45 mmHg




Randomisation des patients

Groupe 1 ULCER X

4 mois ou jusqu'à la cicatrisation de l'ulcère

- Participants éligibles : n = 30
- Abandon : n = 4 (3 patients ayant des difficultés à l'enfilage, 1 patient ayant refusé de poursuivre)
- Évaluation finale : n = 26

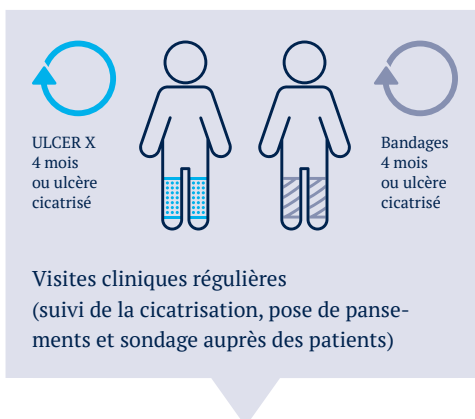

Groupe 2 Bandages


4 mois ou jusqu'à la cicatrisation de l'ulcère

- Participants éligibles : n = 30
- Abandon : n = 0
- Évaluation finale : n = 30



Résultats

Résultats principaux = cicatrisation de l'ulcère et évaluation subjective par les patients

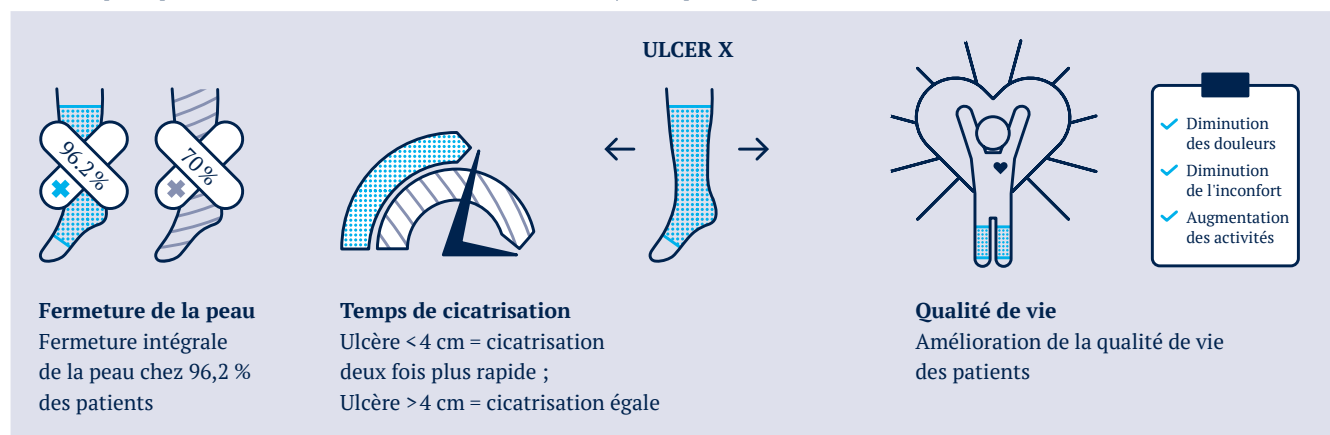

Conclusion

Le port du kit ULCER X est plus efficace dans la cicatrisation des ulcères veineux de la jambe que les bandages conventionnels et permet une guérison plus rapide des petits ulcères < 4 cm. L'étude démontre que le kit ULCER X Sigvaris peut être utilisé de manière efficace pour le traitement des ulcères veineux de la jambe.

De plus, les résultats indiquent que la participation à des activités normales augmente, tandis que les douleurs et l'inconfort sont soulagés chez les patients traités par le kit ULCER X.

Message à retenir

Le traitement des ulcères veineux courants de la jambe avec le kit ULCER X Sigvaris est plus efficace que la pose de bandages conventionnels et est mieux apprécié par les patients.